


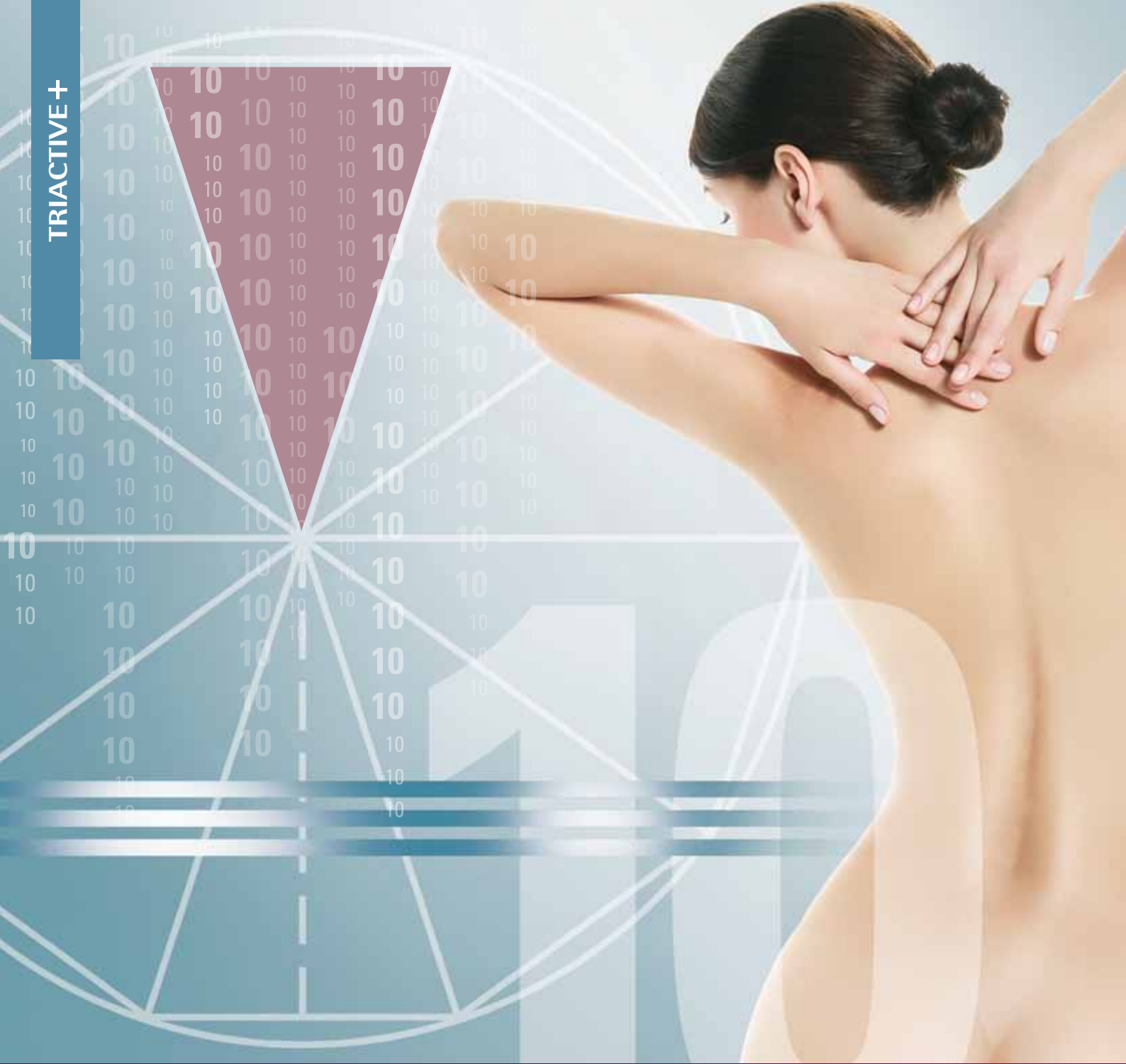

TRIACTIVE+

MEDICINA ED ESTETICA

Trattamento Anticellulite
Adiposità Localizzate
Rilassamento Cutaneo
Anti-Aging
Ritenzione Idrica
Sindrome delle Gambe Pesanti

TRIACTIVE +

Body Shaping Deka:
l'Armonia del Corpo Diventa Scienza

Tecnologie intelligenti Deka:
esperti fin dal primo momento



The Code of Excellence

10

TRIACTIVE+

L'EQUILIBRIO CONDUCE AL BENESSERE

Cellulite, adiposità localizzate e rilassamento cutaneo rappresentano un problema estetico frequente e molto diffuso. Milioni di persone, ogni giorno, cercano di restituire una linea più armonica al proprio corpo con metodi sempre meno invasivi.

TriActive+ nasce da un lungo percorso progettuale e scientifico. In un'unica piattaforma, Deka è riuscita a riunire l'azione di sei differenti manipoli: con l'ausilio dell'esclusivo metodo Dermodynamic, il trattamento diventa parte integrante di una cura completa, diffusa su tutto il corpo.

TriActive+ può restituire la silhouette originaria al paziente: il ritorno a una bellezza armonica è un processo facilmente ottenibile, senza traumi e senza metodi invasivi.

"Sempre più pazienti richiedono trattamenti risolutivi ma non invasivi per cancellare i segni del tempo e ritrovare una linea più armonica del corpo con il bodyshaping.

Si affidano a me con fiducia, perché agisco su tutti gli aspetti di fondo del problema, migliorando profondamente la circolazione vascolare, il drenaggio dei liquidi e ridonando alla cute elasticità e tonicità.

In TriActive+ trovo il mio migliore alleato: per il benessere dei miei pazienti attribuisco grande importanza alla semplicità d'utilizzo della workstation e al database in dotazione, che ogni volta mi supporta nella corretta impostazione dei parametri e nella modulazione dei protocolli più efficaci, validati da ricercatori e medici".

Dr Patrizia Gilardino

Specialista in Chirurgia Plastica
IDE - Istituto Dermatologico Europeo - Milano, Italia

MEDICINA ED ESTETICA


TRIACTIVE+

**TRIACTIVE+: UN'AZIONE RIGENERANTE
PER LA BELLEZZA INTEGRALE**

Le cause di un inestetismo sono molteplici: solo attraverso l'azione sequenziale e sinergica di più sorgenti a bordo dei 6 manipoli è possibile intervenire su tutte le componenti che concorrono nella determinazione di una problematica. È necessario infatti ripristinare il corretto funzionamento generale del corpo umano per rimuovere definitivamente un inestetismo.


La piattaforma TriActive+ utilizza sorgenti laser, ultrasuoni e radiofrequenza per combattere, con un'azione congiunta e sinergica, gli inestetismi della cellulite, le adiposità localizzate e il rilassamento cutaneo.

Skin Tightening e ringiovanimento cutaneo completano l'eccellenza di gamma di TriActive+, una tecnologia progettata per donare armonia al corpo e cancellare i segni visibili del tempo.

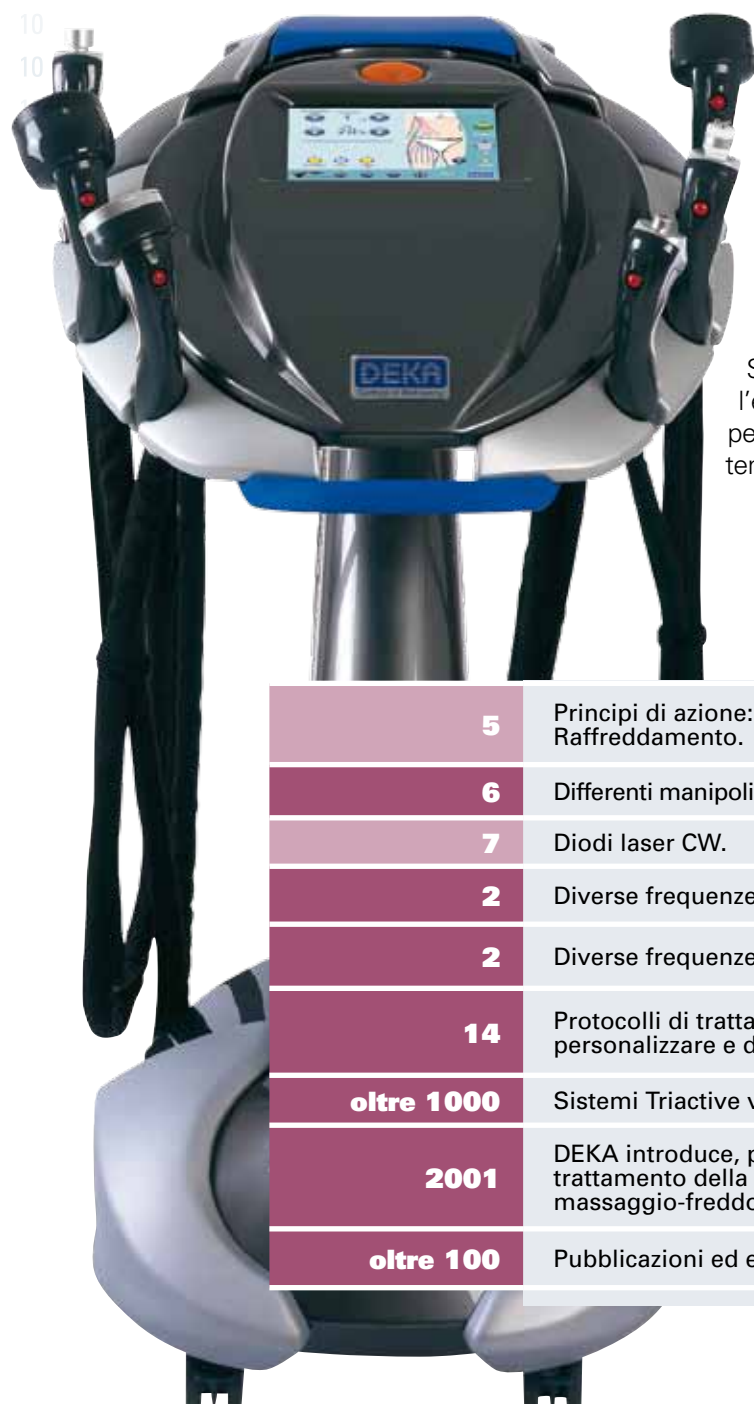

5	Principi di azione: Laser, Ultrasuoni, Radio Frequenza, Massaggio, Raffreddamento.
6	Differenti manipoli per i trattamenti del viso e del corpo.
7	Diodi laser CW.
2	Diverse frequenze di emissione a Radio Frequenza.
2	Diverse frequenze di emissione a Ultrasuoni.
14	Protocolli di trattamento memorizzati nel sistema, con la possibilità di personalizzare e di fare l'upgradare del database.
oltre 1000	Sistemi Triactive venduti nel mondo (dati di gennaio 2010).
2001	DEKA introduce, per prima al mondo, la metodologia Dermodynamic per il trattamento della cellulite grazie all'azione combinata e sinergica di laser-massaggio-freddo.
oltre 100	Pubblicazioni ed editoriali su riviste in tutto il mondo.

LA TRIPLICE AZIONE DEL MANIPOLO LASER

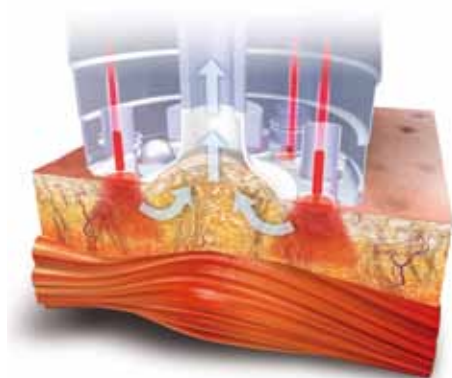

Il manipolo Laser Body riunisce in un unico sistema tre diverse azioni che interagiscono sinergicamente per ripristinare le normali condizioni omeostatiche della cute.

Nel 2001 Deka ha progettato un innovativo manipolo laser con caratteristiche uniche. Dotato di tre differenti tecnologie, il manipolo laser di TriActive+ ripristina le normali condizioni omeostatiche della cute in tempi brevi e con grandi benefici per il paziente. L'azione sinergica e combinata di questi tre principi attivi stimola l'eliminazione dei liquidi in eccesso e delle sostanze tossiche in essi contenute. Questo risulta essere particolarmente utile in presenza di cellulite ai primi stadi evolutivi, caratterizzati da edema e ritenzione idrica. Soprattutto in queste fasi è importante l'azione del laser, che determina l'apertura dei maggiori gangli linfatici e promuove l'eliminazione di tutto ciò che è inutile e dannoso:

Azione 1: stimolazione laser profonda

TriActive+ riattiva e amplifica la microcircolazione arteriosa, venosa e linfatica e favorisce la neoangiogenesi dei vasi intradermici. L'energia della luce laser produce inoltre effetti positivi sull'attività dei fibroblasti.

Azione 2: raffreddamento localizzato

Il sistema di raffreddamento localizzato potenzia l'effetto di riduzione dei volumi e ottimizza il riassorbimento dell'edema stimolando la ginnastica vascolare.

Azione 3: massaggio dermico


Il massaggio ad aspirazione ritmica stimola i processi di linfodrenaggio e la mobilizzazione dei tessuti, favorendo il ripristino della normale tensione collagene-elastica della cute.

La sicurezza e delicatezza di TriActive+, gli consentono di poter trattare pazienti sottoposti ad interventi di laser lipolisi o lipoaspirazione, per abbreviare i tempi di recupero postintervento (regressione dell'edema, della pastosità alla palpazione dei tessuti operati e miglioramento delle ecchimosi), riscontrando una più rapida stabilizzazione del risultato dell'intervento medesimo.


Con i manipoli a radiofrequenza e a ultrasuoni, l'azione di Triactive + diventa ancora più intensa, efficace e selettiva, consentendo il raggiungimento del risultato in tempi brevi.



Tutti i manipoli di TriActive+ sono stati progettati secondo principi di ergonomia per consentire un'agevole impugnatura sia all'operatore destrimane che mancino e trattare qualsiasi zona del corpo senza sforzo o impegno particolare.

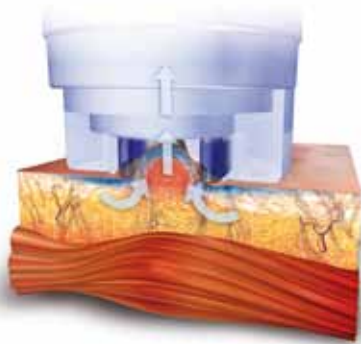

Il manipolo Body a Radiofrequenza utilizza una tecnologia bipolare con aspirazione che attiva un riscaldamento selettivo della sola plica cutanea con un'azione profonda e localizzata sul derma e ipoderma e il contenimento delle correnti di dispersione.

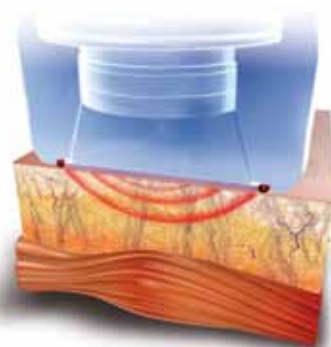

La tecnologia a Ultrasuoni è stata completamente rinnovata grazie alla realizzazione di due manipoli corpo caratterizzati da una diversa frequenza, per offrire un trattamento mirato ad ogni singola esigenza.

LA RIVOLUZIONE DELLA RADIOFREQUENZA: POTENZA ED EFFICACIA CONTRO OGNI INESTETISMO

I manipoli a radiofrequenza di TriActive+ coadiuvano la luce laser nella rimozione della cellulite e migliorano il trofismo della pelle. Grazie anche alla ginnastica tessutale praticata dall'operatore attraverso il manipolo, la radiofrequenza stimola la contrazione delle fibre di collagene, donando una pelle luminosa e levigata. Un visibile ringiovanimento cutaneo con una attenuazione delle rughe ed una intensa azione sul rilassamento tessutale.

Il manipolo Face: la tecnologia multipolare del manipolo riduce gli effetti collaterali e rende i trattamenti molto più tollerabili.

Il manipolo Body: la tecnologia bipolare attiva un riscaldamento selettivo della plica cutanea con un'azione profonda e localizzata sul derma e sull'ipoderma. Il raffreddamento continuo del manipolo, inoltre, permette di preservare gli strati più superficiali.

GLI ULTRASUONI: ELIMINANO LA CELLULITE, RIMODELLANO LA TRAMA TESSUTALE

Le onde prodotte dai manipoli inducono una vibrazione sulle cellule adipocitarie: il massaggio, meccanico e profondo, agisce efficacemente sulla riduzione della fibrosi soprattutto nelle panniculopatie in stadio avanzato. Il massaggio, la mobilizzazione e la stimolazione del tessuto connettivo e adiposo, permette di riattivare fisiologicamente i meccanismi di eliminazione delle tossine e l'ossigenazione dei tessuti, producendo un riallineamento armonico della trama connettivale.

Il manipolo Corpo Deep - LF: la bassa frequenza del manipolo (36-39 kHz) è indicata per i trattamenti delle grandi aree.

Il manipolo Corpo Shallow - HF: il manipolo ad alta frequenza permette di eseguire trattamenti flessibili sulle zone più superficiali e delicate.

TriActive+ acquista così un'azione ancora più profonda per i trattamenti di rassodamento cutaneo e si rivela eccellente in nuovi campi di applicazione come lo skin tightening.

DERMODYNAMIC: LA METODOLOGIA SEMPLICE PER I PROBLEMI COMPLESSI



Gli inestetismi cutanei spesso derivano da più cause tra di loro interconnesse. Per risolvere il problema definitivamente, bisogna intervenire su tutto il corpo. Il trattamento estetico diventa parte integrante di una metodologia completa.

Correttamente applicata, la Dermodynamic Deka consente di ottenere grandi risultati estetici e di offrire un notevole benessere psicofisico ai pazienti sin dalle prime sedute:

Dopo aver raccolto le informazioni sulla sintomatologia, sulle motivazioni e sugli obiettivi del paziente, il professionista può individuare, tra i molteplici protocolli a disposizione, il percorso terapeutico più adatto per affrontare qualsiasi problematica di Bodyshaping e del ringiovanimento. Individuato l'obiettivo, l'operatore può scegliere la corretta sequenza di utilizzo dei manipoli, in funzione delle caratteristiche tecniche specifiche di ognuna delle sorgenti.

Valutando le peculiarità di ogni singola sorgente, è presumibile ipotizzare un percorso terapeutico generico:

- **Tecnologia a Ultrasuoni**
La mobilizzazione dei tessuti riduce le iperplasie e le ipertrofie delle fibre reticolari.
- **Tecnologia Laser**
Il drenaggio dell'edema riduce la stasi veno-linfatica e la ritenzione idrica.
- **Sorgenti a radiofrequenza**
Le radiofrequenze tonificano il tessuto lasso e stimolano l'attività dei fibroblasti.



Ergonomia e design sono riuniti nel sistema TriActive+ che diviene una sintesi perfetta di tecnologia e funzionalità.

L'azione del laser, del raffreddamento, del massaggio, dell'ultrasuono e della radiofrequenza di TriActive+ concorrono al rimodellamento tessutale e donano alla cute tonicità ed elasticità.

Il database: una guida insostituibile dall'anamnesi alla soluzione

TriActive + contiene un Database con una casistica completa di protocolli di trattamento. I protocolli, validati da ricercatori e medici, supportano il medico nella corretta impostazione dei parametri e nella scelta della tecnologie più efficaci.



Il software accessibile a tutti: Comandi semplici, intuitivi e diretti

Il software di TriActive+ è stato progettato con un'interfaccia Touch-screen semplice da utilizzare. Sotto la guida della metodica **Dermodynamic**, il software assicura grande dimestichezza all'operatore che può così eseguire una cura integrale risolvendo anche le problematiche più complesse.

PRE E POST: TRATTAMENTI DI BODYSHAPING



Per gentile concessione di: Dott.ssa P. Gilardino e A. Pelosi, fisioterapista
Milano, Italia



Per gentile concessione di: Dott.ssa P. Gilardino e A. Pelosi, fisioterapista
Milano, Italia



Per gentile concessione di: Dott.ssa P. Gilardino e A. Pelosi, fisioterapista
Milano, Italia



Per gentile concessione di: Dott.ssa P. Gilardino e A. Pelosi, fisioterapista
Milano, Italia

SCHEDA TECNICA

Laser Face

Tipo di laser	Diodo - CW
Lunghezza d'onda	808nm
Potenza	1 W
Massaggio modulabile:	
Frequenza	Da 0,1 a 5 Hz
Duty cycle	Da 5 a 80%
Tipologia	Monofasico / Bifasico / OFF

Laser Body

Tipo di laser	Diodo - CW
Lunghezza d'onda	808nm
Potenza	1 x 6 W
Raffreddamento localizzato	Regolabile da 18 a 28 °C
Massaggio modulabile:	
Frequenza	Da 0,1 a 5 Hz
Duty cycle	Da 5 a 80%
Tipologia	Monofasico / Bifasico / OFF

Ultrasuoni HF

Tipo di US	Alta Frequenza (HF)
Frequenza US	3 MHz
Densità di fluenza	< 3 W/cm ²
Diametro trasduttore	25 mm
Modo	CW-PW
Frequenza di ripetizione degli impulsi	Da 2 a 10 Hz
Energia degli impulsi	Selezionabile tra 20 e 100%
Durata dell'impulso	Da 10 ms a 200 ms

Ultrasuoni LF

Tipo di US	Bassa Frequenza (LF)
Frequenza US	36-39 kHz (Sweep Mode)
Densità di fluenza	< 3 W/cm ²
Diametro trasduttore	70 mm
Modo	CW-PW
Frequenza di ripetizione degli impulsi	Da 2 a 10 Hz
Durata dell'impulso	Da 10 ms a 200 ms
Tempo di sweep (Sweep Mode)	Da 1 a 99 s

Radiofrequenza Face

Tipo di RF	Multipolare
Frequenza	1 MHz
Potenza	20 W (max)

Radiofrequenza Body

Tipo di RF	Bipolare
Frequenza	500 kHz
Potenza	50 W (max)
Raffreddamento localizzato	Regolabile da 18 a 28 °C
Massaggio modulabile:	
Frequenza	Da 0,1 a 5 Hz
Duty cycle	Da 5 a 80%
Tipologia	Monofasico / Bifasico / OFF

Caratteristiche generali

Attivazione del trattamento	Pulsante sul manipolo o pedale
Alimentazione	230Vac/ 2,6 A (max) / 50-60 Hz
Dimensioni e peso	120 (A) x 48 (L) x 60 (P), 60Kg



TRATTAMENTO ANTICELLULITE - ADIPOSITÀ LOCALIZZATE
RILASSAMENTO CUTANEO - ANTI-AGING - RITENZIONE IDRICA
SINDROME DELLE GAMBE PESANTI

TRI-ACTIVE+

CE
0459



RADIAZIONE LASER INVISIBILE
EVITARE L'ESPOSIZIONE DELL'OCCHIO
ALLA RADIAZIONE DIRETTA
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 3R
Max. Potenza Laser @790 + 980nm: 6x1W
Classificato secondo la IEC 60825-1

DEKA

The Code of Excellence



www.dekalaser.com

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italy
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 0558832884

Deka The Code of Excellence
Deka, spin-off del gruppo EL.En., è un'azienda leader nella progettazione e nella produzione di laser e sistemi di luce per applicazioni in campo medicale. Deka commercializza le proprie apparecchiature in più di 80 paesi e può contare su oltre quaranta distributori sui mercati internazionali, su filiali dirette in Francia, Germania, USA e Giappone e su una rete capillare di agenti diretti sul territorio nazionale. L'eccellenza contraddistingue l'esperienza e i primati conseguiti da Deka sul fronte della ricerca e dello sviluppo in oltre trenta anni di attività. Qualità e innovazione tecnologica rendono unico nel mondo il posizionamento di Deka, differenziandone l'offerta sui mercati internazionali. Deka produce apparecchi laser secondo le specifiche della Direttiva 93/42/CEE e adotta un sistema di assicurazione della qualità certificato d in base alle normative ISO 9001 e ISO 13485.